

1. Product Name

Switch-Adapted Fibre Optic Lamp

2. Product Code

20709

3. Colour

Clear base; white fibres

4. Brief Description

Activate your switch to activate the light through the fibres and in the base.

5. Contents

- Switch-Adapted Fibre Optic Lamp

6. Snoezelen® Stimulations

- Sight
- Touch

7. Best Use

Use with a switch connected.

8. Compatible ROMPA® Products

Please see www.rompa.com for our extensive range of switches

9. Starting Up

- Insert 3 AAA batteries.
- Connect a switch to the jack socket.

10. Detailed Description

Very visual and appealing to all ages. Momentary operation – whilst your switch is activated, so is the beautiful light. Base lights up, as do the tips of the fibres. Can also be used without a switch. Requires 3 AAA batteries.

11. Safety

- Supervise the use of this product.
- Do not allow the cable to become a hazard (e.g. a trip hazard).

12. Technical Specification

Size: base 8.5H x 8cm diameter; overall height 31cm
Power: 3 x AAA batteries
Jack: 1/8" (3.5mm)

13. Installation

1. Turn the lamp upside down. Using a cross-head screw driver open the battery compartment.



Insert three AAA batteries, observing the polarity indicated.



Close the battery compartment and tighten the screw to secure in place.

2. If the fibre optics are not already in place in the top of the lamp, insert the solid end into the top of the lamp.
3. Connect the lamp to a switch (not included) via the jack socket at the end of the cable attached. Make sure the ON / OFF switch is set to the OFF position.
3. Activate the lamp by activating the switch you have just connected (momentary operation).
4. Alternatively, set the ON / OFF switch to the ON position and the lamp will be illuminated continuously, without the need for a switch. With the ON / OFF switch set to the ON position, a connected switch will not function.

14. **Care and Maintenance**

- Do not allow clients to pull on the cable.
- Do not immerse the unit in water.
- Change the batteries when operation becomes erratic.
- Remove the batteries when the lamp is not in use for prolonged periods.
- Do not use rechargeable batteries, and do not mix old and new batteries.

15. **Troubleshooting**


*Problem: **the lamp will not illuminate when the switch is activated***

- Make sure your switch is properly connected (pushed as far as possible into the jack socket).
- Check the batteries and replace these as required.
- Make sure your switch is not faulty – check it with another switch-adapted product
- Make sure the ON / OFF switch is set to OFF for switch operation.

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

producthelp@rompa.com

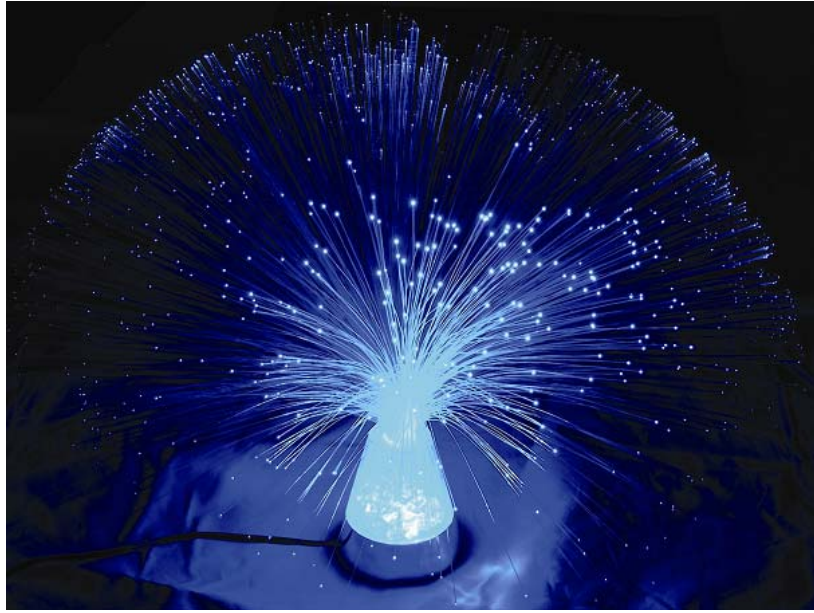

1. Nome do Produto

Ovni de Fibras Óticas Adaptado para Switch

2. Código do Produto

20709

3. Cor

Base translúcida; fibras brancas

4. Descrição Breve

Acione o seu switch para ativar a luz através das fibras e na base.

5. Conteúdo

- Ovni de fibras óticas adaptado para switch

6. Estimulações Snoezelen

- Visão
- Toque

7. Melhor Utilização

Utilize ligado a um switch.

8. Compatibilidade com Produtos Rompa

Por favor visite www.rompa.com para consultar a nossa extensa gama de switches.

9. Começar

- Instale 3 pilhas AAA.
- Ligue um switch na entrada jack.

10. Descrição Detalhada

Muito visual e apelativo para todas as idades. Funcionamento momentâneo – enquanto aciona o switch, também aciona a luz. A base acende, bem como as pontas das fibras óticas. Também pode ser utilizado sem o switch. Necessita de 3 pilhas AAA.

11. Segurança

- Supervisione a utilização deste produto.
- Não permita que o cabo se torne um perigo (ex.: perigo de tropeçar).

12. Especificações Técnicas

Tamanho:	Base 8.5cmA x 8cmD; altura total 31cm
Alimentação:	3 pilhas AAA
Jack:	3.5mm

13. Instalação

1. Vire a base ao contrário. Abra o compartimento das pilhas com uma chave de estrela.



Instale 3 pilhas AAA, tendo atenção à polaridade indicada.



Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

2. Se as fibras óticas ainda não estiverem posicionadas em cima da lâmpada, introduza a ponta das fibras óticas no topo da lâmpada.
3. Ligue a lâmpada a um switch (não incluído) através da ligação jack na ponta do cabo. Verifique se o botão ON/OFF está na posição OFF.
4. Ative a lâmpada ativando o switch que acabou de ligar (funcionamento momentâneo).
5. Alternativamente, coloque o botão ON/OFF na posição ON e a lâmpada ficará acesa continuamente, sem necessidade de ligar um switch. Se o botão ON/OFF estiver na posição ON, o switch não irá funcionar.

14. Cuidado e Manutenção

- Não permita que os utilizadores puxem o cabo.
- Não imerja este produto em água.
- Substitua as pilhas quando o funcionamento se tornar errático.
- Remova as pilhas quando a lâmpada não for utilizada por longos períodos de tempo.
- Não utilize pilhas recarregáveis e não misture pilhas velhas com pilhas novas.

15. Resolução de Problemas

Problema: a lâmpada não acende quando o switch é ativado

- Verifique se o switch está ligado corretamente (jack completamente encaixado).
- Verifique as pilhas e substitua-as caso seja necessário.
- Verifique se o seu switch não está avariado – experimente com outro produto adaptado para switch.
- Verifique se o botão ON/OFF está na posição OFF para permitir o funcionamento do switch